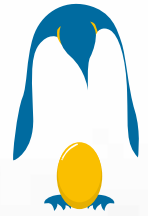


ダイレクトヒート型 CO₂/マルチガスインキュベーター

Direct Heat CO₂/Multigas Incubator

Penguin
Incubator

パーソナルインキュベーター

30Lのダイレクトヒート型CO₂/マルチガスインキュベーターです。
コストパフォーマンスに優れ、省スペースでの培養に最適です！

卓越した培養環境

小型ながら長年養ったASTECのPID温度制御及びCO₂/O₂ガス制御技術で、
大型にも匹敵する培養環境を提供致します！

コンタミネーション防止

棚板ラックは、全て工具無しで簡単に取り外し可能です！
オプションで集塵フィルターキットが追加できます！

自動セットアップ機能

自動セットアップ機能により12時間後、ガス濃度を正確に表示します。

警報装置

温度及びガス濃度の異常の際は、警報音と表示でお知らせします！



30Lダイレクトヒート型インキュベーターは、フルラインナップが出揃いました!

Direct Heat CO₂/ Multigas Incubator ———— 関連オプション ————



レギュレーター
IM-055

2段減圧式の圧力調整器。
低圧領域での微妙な調整が簡単。
1次圧力計 0~25MPa
2次圧力計 0~0.3MPa



集塵フィルターキット
IF-30A

浮遊する塵・カビ胞子をトラップし
庫内汚染の発生を軽減。
薄型集塵フィルター交換用 IF-15T



専用標準架台
AP30STD

インキュベーターを架台に
固定できます。
30シリーズ用 AP30STD
寸法a560×b440×c900×
d345×e530mm



ガラス小扉セット
GAW-30DHS

庫内環境の急激な変化を最小限
にとどめ、コンタミのリスクも軽減。



標準ガスアナライザー
AGA-2008

インキュベーター専用のガス濃度
アナライザー。充電式バッテリー
内蔵でCO₂/O₂ガス濃度両方に対応。
外形寸法 W150×D280×H187mm
製品質量 4.5Kg
電源 AC100V1A



ガスガードシステム
GS-701

使用中のボンベが空になると
自動的に予備ボンベに切替える
装置です。

外形寸法 W215×D340×H94mm
製品質量 4.5Kg
電源 AC100V1A

SCA/SMA仕様

型 式	SCA-30D	SCA-30DR	SMA-30D	SMA-30DR
外 形 寸 法	W415 × D410 × H510 (2段時: W415 × D410 × H1020)			
内 形 寸 法	W 310 × D 295 × H 330			
庫 内 容 量	30ℓ (2段時: 60ℓ)			
外 装	ボンデ鋼板, 静電焼付塗装仕上げ			
内 装	ステンレス鋼板, SUS304			
内 扉	強化ガラス 5mm厚			
棚 板	W252 × D297 × H8 (標準2枚、最大4枚)			
温度制御方式	PID制御			
温度制御範囲	室温+5°C ~ 50.0 °C			
温度制御精度	±0.1°C			
温度分布精度	±0.3°C			
CO ₂ センサ	TCセンサ	IRセンサ	TCセンサ	IRセンサ
CO ₂ 制御範囲	0% ~ 20.0%			
CO ₂ 制御精度	±0.1%			
O ₂ センサ			カルバニ電池式	
O ₂ 制御範囲			1.0%~89.0% ※1	
O ₂ 制御精度			±0.5%	
庫内湿度	95%±4%RH			
加湿方式	自然蒸発 (バット注水)			
庫内対流方式	循環ファンによる対流方式			
安全装置	温度上昇防止機能			
オプション	集塵フィルタ、小扉セット			
製品質量	30Kg			
電 源	AC100V 50/60Hz 4A			

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。 ※1 O₂濃度18%~22%の範囲は、制御できない場合があります。

! 当社では、保証は製品のみを対象とし、製品の故障により誘発される損害は補償できませんので予めご了承ください。



株式会社 アステック

astec URL <http://www.astec-bio.com> E-mail info@astec-bio.com facebook <https://www.facebook.com/asteclaboratory>

発 売 元

代理店

本 社 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号
TEL (092) 935-5585 FAX (092) 936-6613

東京営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目3番1号秋葉原OSビル2F
TEL (03) 3834-4485 FAX (03) 3834-4626

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目4番17号新大阪上野東洋ビル9F
TEL (06) 6838-3108 FAX (06) 6305-4616

福岡営業所 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号アステックビル5F
TEL (092) 935-5685 FAX (092) 935-5581

札幌営業所 〒065-0014 札幌市東区北14条東15丁目3-5 S・Tビル5F B号室
TEL (011) 780-4485 FAX (011) 780-4488